


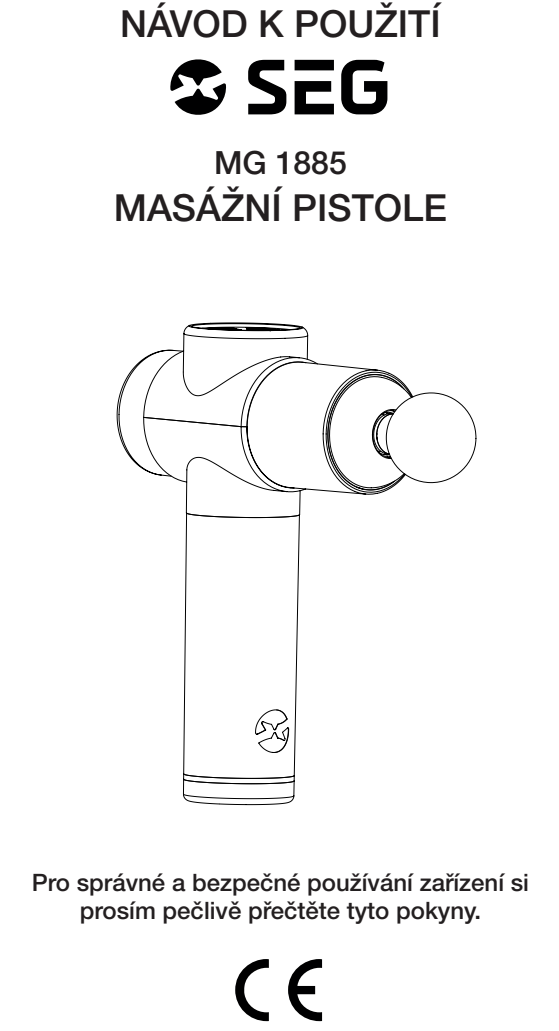

Pro správné a bezpečné používání zařízení si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny.

Před prvním používáním zařízení si prosím přečtete celý uživatelský manuál, zejména bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud zařízení předáte dál, musíte také předat tento provozní manuál.

Tento návod je také dostupný ke stažení v elektronické podobě: www.jaxmotech.de/downloads

Nebo nás kontaktujte. Rádi vám zašleme provozní instrukce ve formě elektronického PDF souboru.
E-mail: service@jaxmotech.de
Telefon: +49 (0)6831 505 9800

EC – DEKLARACE SHODY

Produkt popsany v tomto návodu splňuje všechny požadavky příslušné harmonizované požadavky EU. Kompletní deklarace shody je k dispozici na internetu pod číslem www.jaxmotech.de/downloads.

Ilustrace obsažené v tomto návodu mohou být v některých detailech reprodukovány. Mohou se lehce lišit od skutečného provedení vašeho zařízení. Řiďte se v takovém případě popsányi fakty. Výrobce si vyhrazuje právo provádět takové změny, které neovlivňují fungování zařízení. Zařízení, které jste si koupili, mohlo být vylepšeno a proto se může lišit od provozních instrukcí. Nicméně funkce a provozní podmínky jsou totožné, takže můžete tento návod k obsluze plně využít.

Vyhrazujeme si právo na technické změny nebo tiskové chyby.

Produkty označené symbolem „CE“ jsou v souladu se všemi platnými předpisy Evropské unie pro Evropský hospodářský prostor.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny. Informace v nich obsažené slouží k ochraně vašeho zdraví i zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít vážné negativní dopady na zdraví a poškození zařízení.

Zamýšlené použití

Masážní pistole – model MG 1885 značky SEG – používá se k uvolnění svalů po sportovním tréninku. Její použití uvolňuje svaly, uvolňuje napjaté svalové skupiny a stimuluje prokrvení ošetřovaných oblastí, podporuje rozcvičení před tréninkem a napomáhá k regeneraci po fyzické zátěži.

Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití. Nepoužívejte zařízení na zvířatech. Použití masážní pistole nenahrazuje lékařskou ani terapeutickou léčbu.

Zařízení je určeno výhradně pro provoz v uzavřených prostorech.

Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určeným účelem.

V případě nesprávného použití již nelze zaručit bezpečnost a funkčnost zařízení a zaniká jakýkoli nárok na záruku.

Vysvětlení použitých symbolů

⚠ NEBEZPEČÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést k možnému ohrožení života a zdraví.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů vést ke středně těžkým nebo lehkým zraněním.

⚠ POZNÁMKA!

Označuje situaci, která může při nedodržení pokynů vést k poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

- Nesprávné uložení zařízení s integrovanou baterií může vést k explozím, protože baterie jsou vysoce hořlavé. Proto udržujte zařízení a USB nabíjecí kabel mimo dosah zdrojů tepla (např. varných desek, plynových plamenů, vytápění, přímého slunečního světla).
- Neumistujte v blízkosti výrobku žádné otevřené zdroje ohně, jako jsou hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy mimo dosah předmětu, aby se zabránilo šíření ohně.
- Nevystavujte masážní pistoli přímému slunečnímu záření.
- Vestavěná baterie nesmí a nemůže být vyměněna svépomocí ani zvětšena. Pokud baterie není správně vyměněna, hrozí riziko výbuchu.
- Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie. Pokud je baterie vadná, kontaktujte specializovaný servis.
- Výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Nesmí být rozebírána, vhažována do ohně ani krátkodobě uzavřena.
- Baterii neupravujte a/nebo nedeformujte, nezahřívejte ani nerozebírejte.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nedovolte, aby zařízení používal kdokoli, kdo není seznámen s návodem k použití. Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let, stejně jako osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny k bezpečnému používání zařízení a porozumí z toho vyplývající a související nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nemohou hrát.

Úklid a údržbu uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí mladších 8 let. Zařízení není dětskou hračkou. **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

⚠ NEBEZPEČÍ!

NEBEZPEČÍ CHEMICKÝCH POPÁLENIN A POPÁLENIN KVŮLI ÚNIKU BATERIÍ!

- Zařízení je napájeno dobíjecí baterií. Zařízení uchovávejte na bezpečných místech, kam nemají přístup ani děti, ani zvířata.
- Baterii nikdy neotevírejte.
- Uniklá bateriová kyselina může vést k chemickým popálením.
- Vyhňte se kontaktu bateriové kyseliny s kůží, očima a sliznicemi.
- V případě úniku bateriové kyseliny si vždy nasadte ochranné rukavice.
- V případě kontaktu s bateriovou kyselinou postižené místo okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Nepoužívejte masážní pistoli, pokud je její pouzdro poškozené.
- Nepřipojujte zařízení k napájecímu zdroji za účelem nabíjení, pokud má přístroj, USB nabíjecí kabel nebo napájecí adaptér (není součástí balení) viditelné poškození.
- V případě poškození zařízení, krytu a krytek zařízení musí být odpojeno od elektrického obvodu.
- V případě nebezpečí nebo závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou může používat pouze kvalifikovaný odborník. Otevřete zařízení na výměnu baterie, pokud již nefunguje nebo se rychle vybíjí. Obratťe se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte prodejce, kde jste zařízení koupili.
- K opravám lze použít pouze díly odpovídající původním údajům zařízení. Tento produkt obsahuje součásti, které jsou nezbytné pro ochranu před nebezpečím.
- Poškozené komponenty vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.
- Nikdy nepoužívej vadné zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které spadlo.
- Nikdy neotvírejte kryt.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, smí jej opravit pouze výrobce nebo výrobce autorizovaný tímto výrobcem.
- Zákaznický servis nebo kvalifikovaný specialista (elektrotechnik), aby se vyhnuli nebezpečí.

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Při vybalování se ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kusy) nejsou v dosahu dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
- Pokud je některá součást zařízení poškozena, vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
- Neprovádějte na zařízení žádné úpravy.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin, nečistěte jej pod tekoucí vodou. Dbejte na to, aby do USB konektoru nevnikla vlhkost. **NEBEZPEČÍ ZKRATU!**
- Neumistujte zařízení ani USB kabel na místo, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo deštěm.
- Pokud kapalina pronikne do zařízení, okamžitě ho vypněte!
- Čistič porů by nikdy neměl být pokrytý látkami, dekami apod. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
- Nevystavujte zařízení extrémním podmínkám, jako jsou:
 - Vysoká vlhkost nebo mokro
 - Extrémní teploty
 - Přímé sluneční záření
 - Otevřený oheň
- Nepřipojujte zařízení k napájení zdroji, dokud úplně neodstraníte všechny obalové komponenty a přepravní zajištění.
- Přístroj nabíjejte pouze pomocí vhodného schváleného USB nabíječe, jehož výstup SELV odpovídá vstupním parametrům uvedeným na přístroji.
- Během nabíjení zařízení musí být síťová zástrčka i uzemněná zásuvka po celou dobu zapojeny.
- Technické údaje vašeho elektrického zdroje musí být odpovídají hodnotám uvedených na výrobním štítku.
- Elektrický okruh ve vaší domácnosti musí být vybaven jističem umožňující nouzové odpojení přístroje.

⚠ POZOR!

- Při vybalování si zapamatujte polohu všech částí zařízení, pro případ, že ho budete muset znovu zabalit a převézt.
- Zařízení nepoužívejte dříve, dokud nejsou všechny jeho součásti umístěny správně na svých místech.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nepokládejte zařízení na okraj stolu, aby nespado. Ujistěte se, že je zařízení stabilní. Se zařízením zacházejte opatrně.
- USB nabíjecí kabel vedťe tak, aby se masážní pistole během

nabíjení náhodou nedotkla a nemohla být stržena dolů. USB nabíjecí kabel nesmí být ohnutý ani zmačknutý USB nabíjecí kabel držte dál od ostrých hran a zdroje tepla.

- Uskladněte zařízení tak, aby se neponořilo do vany nebo umyvadla.
- Pokud zařízení spadne do vody, nikdy po něm nesahejte. Zařízení okamžitě odpojte, pokud je zařízení v režimu nabíjení.
- Pokud je masážní pistole již poškozená, zařízení nepoužívejte.
- Nepoužívejte ani se nedotýkejte masážní pistole mokřyma rukama.
- Vypněte masážní pistoli, pokud zařízení chcete čistit nebo když ho nepoužíváte.
- Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, nabíjecí kabel lze vytáhnout ze zásuvky. Nikdy netahat za nabíjecí kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky, ale vždy uchopte za zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí kabel jako rukojeť na přenášení.
- I když je zařízení vypnuté, napětí je v něm, pokud je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky.
- Spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je zástrčka vytažena.
- Bouřky mohou poškodit elektrické spotřebiče. Doporučujeme, abyste zařízení během bouřky nenabíjeli z elektrické sítě.
- Vypněte nebo odpojte zařízení, pokud do něj vniknou cizí předměty.
- Zařízení nesmí při používání způsobovat bolest ani nepohodlí.
- Bez ohledu na nastavení nebo vyvíjený tlak se mohou na těle objevit modřiny. Pokud se objeví příznaky bolesti nebo nepříjemných pocitů, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte zařízení přímo na kostech nebo kloubech,
- na otevřených ranách nebo zraněných místech, v případě akutních poranění (např. natržení svalových vláken), v případě určitých již existujících onemocnění (např. poruchy srážení krve) bez lékařského doporučení.
- Nepoužívejte zařízení na citlivých místech, jako je obličej, hlava nebo krční páteř.
- Masážní pistoli používejte pouze na suchém a čistém povrchu těla, nikoliv přes oděv.
- Nikdy nepoužívej masážní pistoli bez nástavce.
- Aplikace by neměla trvat déle než 30–60 sekund v kuse pro konkrétní svalovou oblast.
- Udržujte vlasy a šperky dál od pohyblivých částí masážní pistole.
- Dbejte na to, aby se vlasy, prsty nebo jiné části těla nedostaly mezi nástavec a rukojeť masážní pistole, abyste předešli zranění.

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!


- Dbejte na to, aby se do krytu masážní pistole nedostaly žádné nevhodné předměty.
- Nevystavujte předmět silným nárazům a chraňte jej před prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Masážní pistole není voděodolná. Nepoužívejte zařízení při sprchování nebo koupání.
- Při vybalování a používání nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.
- Povrch masážní pistole by neměl být vystaven žádnému tlaku, jinak může dojít k poškození.
- Nesprávné čištění zařízení může způsobit její poškození. Vyhněte se používání agresivních čistících prostředků, čistících zařízení s kovovými nebo nylonovými štětinami a nástrojů s ostrými nebo kovovými hranami.

2 CO JE V KRABICI

Po vybalení se ujistěte, že jsou zahrnuty následující díly:

- Masážní pistole
- USB nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)
- 4 x nástavce
- Návod k použití se zárukou

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

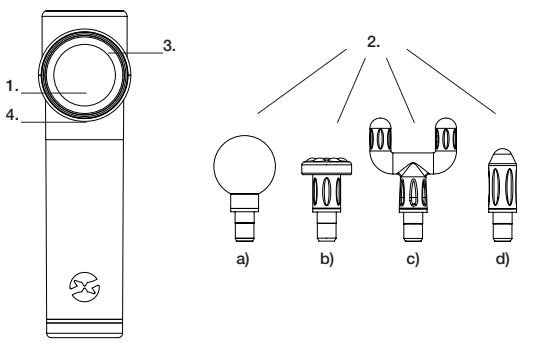

- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Nástavce:
 - Kulový nástavec – pro velké svalové skupiny
 - Plochý nástavec – pro celkovou masáž svalů
 - Vidlicový nástavec – pro oblasti v blízkosti páteře nebo Achillovy šlachy
 - Kartáčový nebo kulový nástavec – pro cílenou masáž spouštěcích bodů
- Digitální displej pro zobrazení stav nabití baterie v procentech a zvolenou intenzitu od 01 do 99
- Konektor pro USB nabíjecí kabel pod digitálním displejem

4 INSTALACE

4.1 Rozbalování

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Při vybalování zařízení nepoužívejte špičaté nebo předměty s ostrými okraji.

- Opatrně vybalte zařízení. Vezměte prosím na vědomí informace o likvidaci obalových materiálů v kapitole 10 – LIKVIDACE.
- Zařízení může být chráněno při přepravě přepravními pojistkami. Ty zcela odstraňte. K odstranění případných zbytků nepoužívejte agresivní čistící prostředky.

- Před použitím masážní pistole zkontrolujte, zda není zařízení poškozené.
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní, viz kapitola 2 – CO JE V KRABICI.

4.2 Čištění

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každým čištěním přístroje musí být masážní pistole vypnuta. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Nikdy neponořujte zařízení ani napájecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin.

- Vnější povrch masážní pistole a nástavce vyčistěte teplou vodou a běžným pracím prostředkem na mytí nádobí.
- Pak vyčištěné části osušte měkkým hadříkem.

5 SLUŽBA

5.1 Nabíjení Baterie

⚠ NEBEZPEČÍ!

Při nabíjení baterie masážní pistole prosím vezměte na vědomí:

- Masážní pistole nesmí být nabíjena v koupelně ani ve vlhkých místnostech.
- Pokud je masážní pistole namočila, nechte ho dobře uschnout, před dalším připojením s USB kabelem. Připojte nabíjecí kabel k síti.
- Neumistujte nádoby naplněné kapalinou, například: Květinové vázy, na přístroj nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Nádoba se může převrhnout a kapalina může ohrozit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry (nejsou součástí balení): AC síťový adaptér třídy ochrany schválený pro použití s domácími spotřebiči s výstupním napětím 5V DC a výstupním proudem max. 1A.
- Během nabíjení se síťový adaptér (který není součástí balení) znatelně zahřívá. To je normální.
- Nepoužívejte vadné nabíječky a nepokoušejte se je opravovat.
- Nepřipojujte masážní pistoli k napájení když samotné zařízení nebo USB nabíjecí kabel mají viditelné poškození.

Proto před prvním použitím plně nabijte ze sítě pomocí síťového adaptéru (není součástí balení). Nepoužívejte zařízení při nabíjení.

- Zapojte jeden konec USB nabíjecího kabelu do zásuvky na masážní pistolí (pod digitálním displejem).
- Druhý konec USB nabíjecího kabelu připojte pomocí vhodného síťového adaptéru (není součástí součástí) do zásuvky. Během proces nabíjení, digitální displej zobrazuje proces nabíjení. Dále je úroveň nabití baterie zobrazena v procentech. Běžné nabíjení trvá asi 4 hodiny s vybitou baterií. Jakmile je baterie plně nabitá, úroveň nabití je zobrazena na 99 %.
- Po nabití odpojte napájecí adaptér (není součástí) ze zásuvky a odpojte USB nabíjecí kabel od masážní pistole. S plně nabitou baterií můžete používat masážní pistolí asi 60 minut. Pokud masážní pistole ukazuje nízkou úroveň baterie, je nutné baterii plně znovu nabít.

5.2 Použití

- Pro výměnu a/nebo nasazení požadovaného nástavce vytáhněte stávající nástavec ze zařízení, když je zařízení vypnuté. Nyní vyberte požadovaný nástavec a nasuňte jej do zařízení. Když je zařízení vypnuté, vložte nástavec přímo rovně na hřídel silným zatlačením.
- Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko napájení na digitálním displeji po delší dobu.
- Tlačítko +/- umožňuje nastavit požadovanou intenzitu. Začněte s nejnižší intenzitou při prvním použití. V případě potřeby můžete intenzitu postupně zvyšovat. Dlouhým stisknutím tlačítka -/+ lze intenzitu snížit nebo zvýšit rychleji.
- Masážní hlavici pomalu a rovnoměrně přejíždějte po vybraném svalu bez vyvíjení silného tlaku.
- Aplikace by neměla trvat déle než 30–60 sekund v kuse pro konkrétní svalovou oblast.
- Po skončení aplikaci stiskněte tlačítko napájení delší dobu, abyste zařízení vypnuli.

6 STORAGE

⚠ DANGER!

RISK OF BURNS AND/OR DAMAGE!

Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, doporučujeme jej skladovat na bezpečném místě.

- Pokud je masážní pistole používána nesprávně nebo uložena, mohou z baterie unikat škodlivé kapaliny (elektrolyty). Vyhněte se jakémukoli kontaktu s unikající baterií a odpovídajícími unikajícími látkami, protože ty mohou způsobit popáleniny, chemické popáleniny a kožní reakce.
- Nikdy nedovolte, aby unikající kapaliny z baterie přišly do kontaktu s očima, sliznicemi nebo pokožkou.
- Pokud se s tekutinou stále dostanete do kontaktu, umyjte postižené místo vodou a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
- Masážní pistole a příslušenství by měly být předem vyčištěny – viz kapitola 7 ČIŠTĚNÍ A PÉČE.
- Zařízení uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zvířat.

7 ČIŠTĚNÍ A PÉČE

⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ POPÁLENIN!

Zařízení se může během používání velmi zahřívát.

Před každým čištěním je třeba nechat zařízení zcela vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý.

NEBEZPEČÍ ZKRATU!

- Nikdy neponožujte zařízení nebo USB kabel do vody nebo jiných kapalin, nečistěte je pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se při čištění do pouzdra nedostaly žádné tekutiny.
- Dbejte na to, aby do USB konektoru nevnikla vlhkost.

Špatná čistota zařízení může poškodit jeho povrch, což ovlivňuje délku životnosti a může vést k nebezpečným situacím. Proto pravidelně čistěte vnější plochy masážní pistole a jejich nástavce.

Nepoužívejte agresivní hrubé čističe, špičaté nebo ostré nástroje k čištění zařízení, protože mohou poškrábat a zničit povrchy.

- Před každým čištěním vypněte masážní pistolí.
- Před čištěním musí být zařízení zcela vychlazeno.
- Vnější povrchy masážní pistole a její nástavce vyčistěte teplou vodou a běžně dostupnými prostředky na mytí nádobí. Pak vyčištěné části osušte měkkým hadříkem.

8 PORUCHA A NÁPRAVA

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte prodejce, kde jste zařízení koupili.
- Nikdy nepoužívejte vadné zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které spadlo.

Pokud během provozu dojde k poruchám, zkontrolujte prosím následující tabulku, zda si můžete problém sami opravit. Všechny ostatní opravy jsou nepřipustné a reklamace na záruku vyprší.

Problém	Možné Příčina	Akce
Zařízení nelze zapnout.	Baterie není nabitá.	Nabít baterii. Viz kapitola 5.1 – NABÍJENÍ BATERIE
Při vysoké intenzitě má slabý výkon.	Baterie je téměř vybitá.	Nabít baterii. Viz kapitola 5.1 – NABÍJENÍ BATERIE
Masážní nástavec správně nedrží.	Nástavec je nasazen šikmo nebo není správně nasazen na dířku.	Nasadte nástavec rovně na dířk. Je-li hlavice poškozená nebo deformovaná, vyměňte ji.

9 TECHNICAL DATA

Typ přístroje:	Masážní Pistole
Model:	MG 1885
Napájení/akumulátor:	Lithium-iontový akumulátor 7,4 Vd.c., 1500 mAh, 11,1Wh
Doba nabíjení:	cca 4 hodiny
Doba provozu:	max. 60 minut
Materiál:	ABS
Motor:	3600 RPM
Příkon:	25W
Vstupní napětí:	5V
Vstupní proud:	1A
Rozměry výrobku:	223 x 170 x 63 mm (Š x H x V)
Čistá hmotnost:	637.2g
Délka USB nabíjecího kabelu:	50cm

S ohledem na technické změny!

10 LIKVIDACE

- Při vybalování se ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kusy) nedostaly do blízkosti dosahu dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
- Staré přístroje, které již nejsou používány, musí být odeslány do odpovědného recyklačního centra. Za žádných okolností nevystavujte otevřenému ohni.
- Vysloužilé přístroje nejsou běžným odpadem. Jejich ekologickou likvidací lze získat zpět mnoho cenných surovin.
- Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách mohou nebezpečné látky pronikat do podzemních vod. Tyto látky se následně mohou dostat do potravního řetězce a negativně ovlivnit vaše zdraví i životní prostředí.
- Před likvidací přístroj vždy znefunkčňte. To znamená, že je nutné vyjmout baterie a zlikvidovat je odděleně.
- Materiály použité při výrobě přístroje jsou recyklovatelné a jsou příslušně označeny. Správnou likvidací přístroje, jeho materiálů i obalu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uložte jej do určených sběrných nádob.
- Pokud ve vašem obytném prostoru nejsou vhodné kontejnery na likvidaci, odnesete tyto materiály na vhodné městské sběrné místo.
- Podrobnější informace získáte u svého prodejce nebo u příslušných místních orgánů zajišťujících nakládání s odpady.



Likvidace obalů

Obal zlikvidujte podle jednotlivého druhu materiálu. Karton a lepenku odevzdejte do sběru papíru, fólie do sběru pro recyklaci (tříděného odpadu).



Správná likvidace použitého elektrického a elektronického vybavení (Elektronický odpad): Symbol přeškrtnutého odpadkového koše označuje potřebu oddělené likvidace elektrických a elektronických zařízení. Podle evropských předpisů již použité elektrické a elektronické zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad, ale musí být odevzdáno na vhodné zřízeném sběrném místě pro recyklaci takového vybavení. Společnosti zabývající se nakládáním s komunálním odpadem zřídily pro tento účel sběrná místa, kde domácnosti mohou bezplatně odevzdat svá vysloužilá zařízení. Informace o možnostech odevzdání ve vašem regionu získáte na obecním úřadě nebo u místní společnosti zajišťující odpadové hospodářství.



Baterie a dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu! Baterie a dobíjecí baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinni správně likvidovat použité a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoliv. Pokud možno prosím před dobíjením vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie před likvidací zařízení a odevzdejte je na určených sběrných místech nebo v obchodech, aby je bylo možné zlikvidovat šetrným způsobem k životnímu prostředí. Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na sběrném místě ve vaší obci nebo v obchodech, aby mohly být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem a také k získávání cenných surovin. Pokud je nesprávně likvidováno, toxické látky mohou být uvolněny do životního prostředí, což mají škodlivé účinky na lidi, zvířata i rostliny. Vhazujte baterie a akumulátory pouze pokud jsou vybité. Pokud je to možné, používejte akumulátory namísto jednorázových baterií. Baterie se zvýšeným obsahem škodlivých látek jsou také označeny následujícími symboly: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

⚠ NEBEZPEČÍ!

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ!

Použité baterie mohou obsahovat znečišťující látky nebo těžké kovy, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Látky nebezpečné pro zdraví se mohou dostat do podzemních vod. Takové látky tak vstupují do potravního řetězce a škodí vašemu zdraví a pohodě. Kromě toho baterie obsahují cenné suroviny, které lze znovu využít ekologicky šetrnou likvidací.

⚠ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

- Baterie a dobíjecí baterie obsahující lithium (Li = lithium) musí být správně zlikvidovány. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
- Nesprávná likvidace může vést ke zkratům v důsledku tepla nebo poškození. Hrozí **NEBEZPEČÍ POŽÁRU A NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
- Aby se předešlo možným zkratům, měli byste pólové svorky baterií a akumulátorů obsahujících lithium zalepit lepicí páskou.
- Před likvidací je nutné vyjmout baterie a dobíjecí baterie ze zařízení a měly by být zlikvidovány odděleně. Před likvidací se ujistěte, že jsou baterie a akumulátory vybité.

11 ZÁRUKA VÝROBCE

- Na tento přístroj poskytujeme zákonnou odpovědnost za vady po dobu 2 let a běžnou obchodní záruku počínaje datem vystavení faktury nebo dodacího listu.
- Během této záruční lhůty, po předložení dokladu o koupi nebo dodacího listu, budou všechny výrobní a/nebo materiálové vady, které nastanou, bezplatně vyřešeny opravou a/nebo výměnou vadných dílů, případně (dle našeho uvážení) výměnou za rovnocenný výrobek bez vad.
- Výrobce neodpovídá za újmu na zdraví ani za věcné škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nedostatečné údržby.
- Snadno rozebíraté části, jako je sklo, plast nebo lampy, nejsou zahrnuty v záruce.
- Záruka zaniká, pokud přístroj otevřete vy nebo třetí osoba, která k tomu nebyla námi oprávněna, nebo pokud na přístroji provedete jakékoli úpravy.
- Při použití v rozporu s určeným účelem nelze zaručit bezpečnost ani správnou funkci přístroje a zanikají veškeré nároky ze záruky.
- Jakékoli použití, které není popsáno v tomto návodu k použití, je nepřipustné a vede ke ztrátě práv z odpovědnosti za vady, záruky i odpovědnosti výrobce.
- Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny přístroje, návodu k použití i obalu.

Pokud chcete podat stížnost, obecně doporučujeme nejprve kontaktovat prodejce, od kterého jste zařízení koupili.

Pokud je oprava nutná, můžete se na naši linku obrátit na následující číslo
Provozní číslo: +49 (0)6831 505 98 97.

Technický servis

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de


Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de

INSTRUCTION MANUAL



MG 1885

MASSAGE GUN

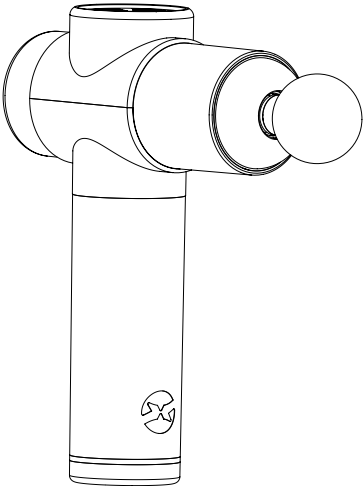

For proper and safe use of the device, please read these instructions carefully.



Please read the entire user manual, especially the safety instructions, before using the device for the first time. Keep this instruction manual in a safe place for future use. If you pass on the device, you must also hand over this operating manual.

This instruction manual is also available for download in an electronic format:
www.jaxmotech.de/downloads

Or contact us. We will be happy to send you the operating instructions as an electronic PDF file.
E-mail: service@jaxmotexch.de
Phone: +49 (0)6831 505 9800

EC – DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this instruction manual complies with all relevant harmonised requirements of the EU. The complete Declaration of Conformity can be found on our website: www.jaxmotech.de/downloads.

The illustrations contained in this instruction manual may differ from the actual design of your device. In such cases follow the facts described. The manufacturer reserves the right to make such changes that do not affect the functioning of the device. The device you purchased may have been changed and may therefore have differences from the operating instructions. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical, so that you can use the operating instructions to the full extent.

Technical changes or printing errors are reserved.

 Products marked with the „CE“ symbol comply with all applicable Community regulations of the European Union economic area.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions carefully before using the device. The information contained herein are for the purpose to protect your health and the device. Failure to follow the safety instructions may result in serious adverse effects on your health and damage to your device.

Intended use
The massage gun – SEG model MG 1885 – is intended for muscle relaxation after sports training. The application of this device loosens the muscles, relaxes tense muscle groups, stimulates the blood circulation in the treated areas, supports warm-up before training and promotes regeneration after physical exertion.

The device is exclusively for private use and not for commercial use. Do not use the device on animals. The use of the massage gun does not replace medical or therapeutic treatment.

The device is intended exclusively for the operation indoors. Operate the device only in the sense of its intended use.

In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.

Explanation of the symbols used

 **DANGER!**
refers to a dangerous situation which, if not averted, poses an immediate threat to life and health.

 **WARNING!**
refers to a dangerous situation which, if not averted, may pose possible imminent danger to life and health.

 **CAUTION!**
refers to a dangerous situation which, if not averted, may result in moderate or minor injuries.

 **NOTE!**
refers to a dangerous situation which, if not averted, results in possible damage to the device.

 **WARNING!**
EXPLOSION HAZARD!

- Incorrect storage of the device with an integrated rechargeable battery can lead to explosions, as batteries are highly flammable. Therefore, keep the device and the USB charging cable away from heat sources (e.g. hotplates, gas flames, heating, direct sunlight).
- Do not place open sources of fire such as burning candles near the item. Candles and other open flames must be kept away from the item at all times to prevent the spread of fire.
- Do not place the massage gun in direct sunlight.
- The built-in rechargeable battery cannot and must not be replaced by the user. If the built-in battery is not replaced properly, there is a risk of explosion.
- Replacement only with the same or equivalent battery type. If the battery is defective, contact a specialist workshop.
- The article contains a lithium-ion battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not alter and/or deform/heat/disassemble built-in batteries.

 **WARNING!**
Do not allow anyone who is not familiar with the user manual to use the device. This device can be used by children aged below 8 years, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers. Children are not allowed to play with the device.

Cleaning and maintenance by the user may not be carried out by children unless they are 8 years of age or older and are supervised.

The device should be kept away from children younger than 8 years of age. The device is not a children's toy. **RISK OF INJURY!**

 **DANGER!**
RISK OF CHEMICAL BURNS AND BURNS DUE TO LEAKING BATTERIES!

- The device is powered by a built-in rechargeable battery. Keep the device in safe places where children and animals have no access to.
- Never open the battery.
- Leaked battery acid can lead to chemical burns.

- Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes.
- In the event of a leaking battery, be sure to wear protective gloves.
- In case of contact with the battery acid, rinse the affected place immediately with plenty of clear water and consult a doctor.

 **DANGER!**

- Do not use the massage gun if the housing is damaged.
- Do not connect the device to the power supply for charging if the device, the USB charging cable or the power plug (not included in content) has visible damage.
- In case of damage of the device, the housing and covers, the device must be disconnected from the electrical circuit.
- In the event of danger or a defect, pull immediately the mains plug from the socket.
- This device contains a battery that can only be replaced by a qualified professional. Do not open the device to replace the battery if it no longer charges or it discharges quickly. Contact the retailer from whom you purchased the device.
- Never try to repair the device yourself. If your device is not working properly, contact the retailer where you purchased the device.
- Only spare parts that correspond with the original device data may be used for repairs. This product contains parts that are essential to protect against hazards.
- Replace damaged components only with suitable original spare parts.
- Never use a defective device.
- Never operate a device that has been dropped.
- Never open the case.
- If the charging cable is damaged, it must be repaired only by the manufacturer, customer service or similarly qualified specialists (electrician) in order to avoid hazards.
- Do not use power strips, multiple sockets or extension cords to connect the appliance to the power supply.
- You will need a safety socket that is properly earthed in accordance with the mains plug and is dedicated exclusively to this appliance. Otherwise, it can lead to dangerous accidents or damage to the device.

 **DANGER!**

- When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) should not be within the reach of children. **DANGER OF SUFFOCATION!**
- If a system part is damaged, avoid open flames and ignition sources. Contact immediately your customer service.
- Do not make any changes to the device.
- Never immerse the device in water or other liquids, do not clean it under running water.
- Make sure that no moisture enters the USB connection socket. **DANGER OF SHORT CIRCUIT!**
- Do not place the device or USB cable in a place where it will come into contact with water/rain.
- If liquid penetrates the device, switch off the device immediately!
- The make-up mirror should never be covered with cloths, blankets, etc. **FIRE HAZARD!**
- Do not expose the device to extreme conditions, such as:
 - High humidity or wetness
 - Extreme temperatures
 - Direct sunlight
 - Open fire
- Do not connect the device to the power supply for charging until you have completely removed all packaging components and transport locks.
- Only charge the appliance using a suitable, approved USB charger whose SELV output rating matches the input rating specified on the appliance
- During charging the mains plug and the earthed socket must be easily accessible at all times.
- The technical data of your electrical supply must correspond to the values indicated on the rating label.
- Your home circuit must be connected to a circuit breaker for emergency shutdown of the device.

 **CAUTION!**

- Remember the positions of all parts of the device when you unpack it, in case you need to pack it up and transport it again.
- Do not use the appliance until all of its parts are properly in their intended locations.

 **WARNING!**
RISK OF INJURY!

- Do not place the device on the edge of a table to avoid falling

- off. Make sure that the device is stable. Use the device carefully.
- During charging, position the USB charging cable so that the massage gun cannot be accidentally pulled down.
- The USB charging cable must not be bent or crushed.
- Keep the USB charging cable away from sharp edges and heat sources.
- Store the device so that it does not fall into a tub or sink.
- If the device falls into water, never reach for the product. Unplug immediately if the device is in charging status.
- If the massage gun is already damaged, do not use the device.
- Do not use or touch the massage gun with wet hands.
- Turn off the massage gun when you want to clean or not use the device.
- To completely disconnect the device from the mains, the charging cable should be pulled out of the socket. Never pull the charging cable when you want to unplug it from the socket, but always grab the plug.
- Never use the charging cable as a carrying handle.
- Even when the device is switched off, there is voltage as long as the power plug is plugged into the socket.
- The appliance is only disconnected from the mains when the power plug is pulled.
- Thunderstorms can damage electrical appliances. We recommend that you do not charge the device during a thunderstorm.
- Turn off or disconnect the device if foreign objects enter the device.
- The device must not cause pain or discomfort when used.
- Regardless of the setting or pressure applied, bruises can appear on the body. Discontinue use immediately if signs of pain or discomfort appear.
- Do not use the device directly on bones or joints, on open wounds or inflamed areas, in the case of acute injuries (e.g. torn muscle fibres), in the case of certain pre-existing conditions (e.g. blood clotting disorders) without medical advice.
- Do not use the device on sensitive areas such as the face, head or cervical spine.
- Run the massage gun only over a dry and clean body surface and not over clothing.
- Never use the massage gun without an attachment.
- An application should not last more than 30-60 seconds continuously for a specific muscle area.
- Keep hair and jewelry away from moving parts of the massage gun.
- Make sure that hair, fingers or other parts of the body do not get between the attachment and the stock of the massage gun

to avoid injury.

 **WARNING!**
RISK OF DAMAGE!


- Make sure that no improper items are in the housing of the massage gun.
- Do not expose the item to violent shocks and protect it from dust, moisture, direct sunlight radiation and extreme temperatures.
- The massage gun is not waterproof. Do not use the device while showering or bathing.
- When unpacking do not use pointed or sharp-edged objects.
- The surface of the massage gun should not be subjected to any pressure, otherwise damage may occur.
- Improper cleaning of the device can result in damage. Avoid using aggressive cleaning agents, cleaning equipment with metal or nylon bristles, and sharp-edged or metallic cleaning instruments.

2 CONTENT

After unpacking, make sure that the following parts have been included:

- Massage gun
- USB charging cable (USB-A to USB-C)
- 4 x attachments
- Instruction manual with warranty

3 DEVICE PARTS

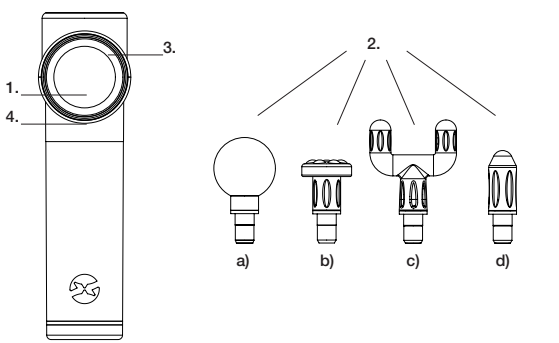

1. On/off button
2. Attachments:
 - a) Ball attachment – for large muscle groups
 - b) Flat attachment – for general muscle massage
 - c) Fork attachment – for areas adjacent to the spine or Achilles tendon
 - d) Cartridge or bullet attachment – for targeted trigger points
3. Digital display to show the battery charging level in % and the selected intensity level from 01 to 99
4. Connector for USB charging cable (below the digital display)

4 INSTALLATION

4.1 Unpacking

 **WARNING!**
RISK OF DAMAGE!
When unpacking the device, do not use pointed or sharp-edged objects.

1. Carefully unpack the device. Please note the information for the disposal of packaging materials in Chapter 10 – DISPOSAL.
2. The device may be protected for transport with transport locks. Remove them completely. Do not use aggressive cleaning agents to remove leftovers of the transport locks.
3. Before using the massage gun, check whether the device is

- damaged.
4. Check the scope of delivery, see Chapter 2 – CONTENT.

4.2 Cleaning

 **WARNING!**
Before each device cleaning, the massage gun must be switched off. **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

Never immerse the device or USB cable in water or other liquids.

1. Clean the outer surface of the massage gun and the attachments with warm water and standard household washing-up liquid.
2. Dry the cleaned parts with a soft cloth.

5 GETTING STARTED

5.1 Charging the Battery

 **DANGER!**
When charging the battery of the massage gun, please note:

- The massage gun must not be charged in the bathroom or in damp rooms.
- If the massage gun has become wet, let it dry well before connecting the USB charging cable to the mains.
- Do not place vessels filled with liquids, such as flower vases, on or in the immediate vicinity of the item. The vessel can tip over and the liquid can compromise electrical safety. There is a **risk of electric shock**.
- Use only suitable AC adapters (not included in content) for charging: AC adapter of protection class approved for use with household appliances with an output voltage of 5V DC and an output current of max. 1A.
- During charging, the AC adapter (not included in content) becomes noticeably warm. That's normal.
- Do not use defective chargers and try to repair these.
- Do not connect the massage gun to the power supply when the device itself or the USB charging cable has visible damage.

Before using the device for the first time, fully charge the battery from the mains using a mains adapter (not included in content). Do not use the device while charging.

1. Plug one end of the USB charging cable into the socket on the message gun (below the digital display).
2. Connect the other end of the USB charging cable with a suitable AC adapter (not included in content) to a power outlet. During the charging process, the digital display shows the charging process. Furthermore, the charge level of the battery is displayed in %. A normal charging process takes about 4 hours with an empty battery. Once the battery is fully charged, the charge level is displayed at 99%.
3. After charging, unplug the AC adapter (not included in content) from the power outlet and disconnect the USB charging cable from the massage gun. With a fully charged battery, you can use the massage gun for about 60 minutes . If the massage gun shows a low battery level, the battery must be fully recharged.

5.2 Operation

1. To change and/or put on the desired attachment, pull the existing attachment from the device with the device switched off. Now select the desired attachment and insert it onto the device. When the device is switched off, insert the attachment completely straight onto the shaft by pressing firmly into it.
2. To turn on the device, press the power button on the digital display for an extended period of time.
3. The +/- button allows you to set the desired intensity. Start with the lowest intensity level for the first application. If necessary, you can gradually increase the intensity. By pressing the +/- button for a long time, the intensity can be reduced or increased more quickly.
4. Run the massage head slowly and evenly over the selected muscle without exerting strong pressure.
5. An application should not last more than 30-60 seconds continuously for a specific muscle area.
6. After application, press the power button for a longer period of time to turn off the device.

6 STORAGE

-  **DANGER!**
RISK OF BURNS AND/OR DAMAGE!
If you do not use the device for a longer period of time, we recommend that you store it in a safe place.
- If the massage gun is used improperly or stored incorrectly, harmful liquids (acids) can leak from the battery. Avoid any contact with a leaking battery and the corresponding escaping substances, as these can cause burns, chemical burns and skin intolerances.
 - Never allow leaking battery fluids to come into contact with eyes, mucous membranes or skin.
 - If you still come into contact with the liquid, wash the affected area with water and consult a doctor if necessary.
 - The massage gun and attachments should be cleaned before every use - see Chapter 7 – CLEANING AND CARE.
 - Keep the device in a safe place where children and animals do not have access to.

7 CLEANING AND CARE

-  **WARNING!**
RISK OF BURNS!
The device may get very hot during use.
Before each cleaning, the device should be completely cooled down.

-  **WARNING!**
Before each cleaning, the appliance must be switched off.
- DANGER OF SHORT CIRCUIT!**
- Never immerse the device or USB cable in water or other liquids, do not clean it under running water.
 - Make sure that no liquids get into the case during cleaning.
 - Make sure that no moisture enters the USB connection socket.

Poor cleanliness of the device can destroy the surface of the device, which affects the service life and potentially leads to dangerous situations. Therefore, clean the outer surfaces of the massage gun and the attachments regularly.

Do not use aggressive abrasive cleaners or pointed or sharp-edged instruments to clean the appliance, as they can scratch and destroy the surfaces.

1. Turn off the massage gun before each cleaning.
2. Before cleaning, the device must be completely cooled down.
3. Clean the outer surfaces of the massage gun and its attachments with warm water and standard household washing-up liquid. Dry the cleaned parts with a soft cloth.

8 TROUBLESHOOTING

-  **DANGER!**
- Never try to repair the device yourself. If your device is not working properly, contact the retailer where you purchased the device.
 - Never operate a defective device.
 - Never operate a device that has been dropped.

If malfunctions occur during operation, please check the following table to see if you can fix the problem yourself. All other repairs are not permitted and the warranty claim expires.

Problem	Possible Cause	Action
Device can not be turned on.	Battery is not charged.	Charge the battery. See Chapter 5.1 – CHARGE BATTERY
High intensity level has weak performance.	Battery is almost empty.	Charge the battery. See Chapter 5.1 – CHARGE BATTERY
Attachment is not properly fitted.	Attachment has been pushed into the shaft at an angle.	Insert the attachment straight into the shaft by pressing it firmly into place.

9 TECHNICAL DATA

Device Type:	Massage Gun
Model Number:	MG 1885
Power supply/battery:	Lithium-ion battery 7.4 Vd.c., 1500 mAh, 11.1Wh
Charging Time:	approx. 4 hours
Operating time:	Maximum 60 minutes
Material:	ABS
Motor Speed:	3600 RPM
Power:	25W
Input Voltage:	5V
Input Current:	1A
Product Dimensions:	223 x 170 x 63 mm (W x D x H)
Net Weight:	637.2g
USB Charging Cable Length:	50cm

Subject to technical changes!

Technical data integrated rechargeable battery	
Manufacturer:	Wenzhou Saiwei New Energy Technology Co., LTD 2F, Building2, No. 30-70, Xingqiang Road, Electromechanical Pioneer Park, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R.China
E-Mail:	kaeru101@outlook.com
Battery Model:	18650-1500mAh 2IMR19/66
Date of Manufacture:	2026/08
Made in:	China
Imported by:	Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Subject to technical changes!

10 DISPOSAL

- When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) do not come within the reach of children. **DANGER OF SUFFOCATION!**
- Old appliances that are no longer in use must be sent to the responsible recycling centre. Under no circumstances should they be exposed to open flames.
- Old appliances are not unusable waste. Environmentally friendly disposal recovers many valuable raw materials.
- When electrical equipment is disposed of in landfills, substances that are hazardous to health can enter the groundwater. Thus, such substances enter the food chain and harm your health and well-being.
- Before you dispose of any old device, be sure to make it inoperable first! This means always removing the batteries and disposing of them separately.
- The materials used in the device are recyclable and are provided with appropriate information. By disposing of your old device or its materials as well as the packaging properly, you make a significant contribution to protecting our environment.
- Dispose of the packaging material in the appropriate disposal containers in accordance with the local regulations of your place of residence.
- If there are no suitable disposal containers in your living area, take these materials to a suitable municipal collection point.
- For more information, please contact your specialist dealer or your local municipal waste disposal facility.

-  **Disposal of packaging**
Please sort the packaging for recycling. Put cardboard and paperboard in the waste paper bin and plastic film in the recycling bin.

-  **Correct disposal of used electrical and electronic equipment (Electronic waste):**
The symbol of the crossed-out waste bin indicates the need for separate disposal of electrical and electronic devices. According to European regulations, used electrical and electronic equipment may no longer be treated as normal household waste, but must be handed in at a designated collection point for the recycling of such equipment. Local waste management companies have set up collection points for this purpose, where private households can hand in their old appliances free of charge. Please contact your local authority or the municipal waste disposal companies to find out about the

regional possibilities of returning these items.

-  **Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste!**
Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As a consumer, you are legally obliged to dispose of used batteries and rechargeable batteries properly, regardless of whether they contain harmful substances or not. As far as possible, please remove all batteries and rechargeable batteries before disposal of the device and return them to the designated collection points or in stores so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Used batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge at a collection point in your municipality/district or in stores so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and valuable raw materials can be recovered.
- If disposed of improperly, toxic ingredients can be released into the environment, which have harmful effects on humans, animals and plants. Return used batteries and rechargeable batteries only when discharged. Use when possible rechargeable batteries instead of disposable batteries. Batteries with high contaminant content are also marked with the following signs:
- Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

-  **DANGER!**
ENVIRONMENTAL AND HEALTH DAMAGE!
Used batteries may contain pollutants or heavy metals that can be harmful to the environment and health. Substances that are hazardous to health can get into the groundwater. Thus, such substances enter the food chain and harm your health and well-being. In addition, batteries contain valuable raw materials that can be reused through environmentally friendly disposal.

-  **EXPLOSION HAZARD!**
- Batteries and rechargeable batteries containing lithium (Li = lithium) must be properly disposed of. **FIRE HAZARD!**
 - Improper disposal can lead to short circuits, due to heat or damage. There is **FIRE AND EXPLOSION HAZARD!**
 - To avoid possible short circuits, you should tape the terminals of lithium-containing batteries and rechargeable batteries.
 - Before disposal, batteries and rechargeable batteries must be removed from the device and should be disposed of separately. Before disposal, make sure that batteries and rechargeable batteries are in a discharged state.

11 MANUFACTURER’S WARRANTY

- We offer a 2-year warranty on your device and the standard commercial warranty from the date of issue of the invoice or buying receipt.
- Within this warranty period, upon presentation of the proof of purchase or the buying receipt, all manufacturing and/or material defects that occur will be settled free of charge by repair and/or replacement of the defective parts or (at our discretion) by exchange for an equivalent, flawless article.
- The manufacturer is not liable for personal injury or property damage caused by improper use or maintenance.
- Easily breakable parts such as glass, plastic or lamps are excluded from the warranty.
- The warranty is void if the device has been opened and/or modifications made to the device by you or a third party not authorized by us.
- In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guaranteed and any warranty claim expires.
- Any use other than as described in this operating manual is not permitted and will result in loss of warranty and exclusion of liability.
- Printing errors and changes to the device, the operating instructions or the packaging are reserved.

If you would like to make a complaint, we generally recommend that you first contact the dealer from whom you purchased the device.

If a repair is necessary, you can reach our hotline at the following Service number: +49 (0)6831 505 98 97.

Technical Service

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
E-mail: service@jaxmotech.de

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany
Service Hotline: +49 (0)6831 5059897
service@jaxmotech.de
www.jaxmotech.de